


FORMOCRESOL

Material para Mumificação da Polpa Dental

biodinâmica®

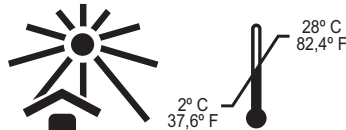

Conservar ao abrigo da luz solar em temperaturas entre 2 a 28 °C.



BIODINÂMICA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 84.833.888/0001-33 - Indústria Brasileira
R. Ronat Walter Sodré, 4350 Parque Industrial IV
86200-000 Ibioporã - Paraná - Brasil
Fone +55 (43) 3178-7000 Fax + 55 (43) 3178-7099

www.biodinamica.com.br

Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo
CRO/PR 9713



SAC - Customer Service
sac@biodinamica.com.br
+ 55 43 3178-7000

APRESENTAÇÃO:

1x10mL frasco **FORMOCRESOL**.

Reg. ANVISA: 10298550076.

COMPOSIÇÃO:

Formaldeído, orto-Cresol, Glicerina e Álcool Etilico 96º.

INDICAÇÃO:

FORMOCRESOL é utilizado no tratamento conservador dos dentes decíduos e em casos específicos de dentes permanentes.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

A formulação do **FORMOCRESOL** obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica.

Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia). Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Anestesiari e isolar o dente, de preferência com isolamento absoluto;
2. Remover todo o tecido cariado;
3. Remover o teto da câmara pulpar;
4. Fazer a pulpotomia (remoção da polpa coronária);
5. Fazer a hemostasia e lavar a câmara pulpar com soluções irrigadoras detergentes e umectantes (p.ex. Tergipol ou Tergental);
6. Aplicar uma bolinha de algodão embebida com **FORMOCRESOL**, sobre os cotos pulpares, devendo ficar por 5 a 7 minutos até promover a hemostasia;
7. Remover o algodão e colocar uma camada de Óxido de Zinco e Eugenol e outra com cimento Fosfato de Zinco. Proceder a restauração.

CUIDADOS ESPECIAIS:

- Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

CONTRAINDICAÇÃO:

FORMOCRESOL é contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.

ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar produtos além do período indicado de validade.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

“ MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS ”

USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA

FORMOCRESOL

Material para Momificación Pulpar

biodinámica®

PRESENTACIÓN:

1x10mL frasco **FORMOCRESOL**.

Reg. ANVISA: 10298550076.

COMPOSICIÓN:

Formaldehído, Orto-Cresol, Glicerina y Alcohol Etilico 96°.

INDICACIÓN:

FORMOCRESOL es usado como tratamiento conservador de los dientes deciduos y en algunos casos específicos para dientes permanentes.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

La formulación del **FORMOCRESOL** sigue los patrones orientados por las pesquisas actuales, siendo así más diluido que la composición patrón de Buckley, pero con la misma eficacia o superior y una más grande compatibilidad biológica. Su función es fijar pulpas vivas manteniéndolas inertes y posibilitando la conservación del diente deciduo hasta el período natural de su pulpotomía. Tiene acción antibacteriana potente debido a la acción de su componentes, lo que justifica su uso como curativo de demora en los tratamientos endodóncicos.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Anestesia y aislamiento absoluto del diente (rubber dam);
2. Remoción del tejido cariado;
3. Remoción de la cobertura de la cámara pulpar;
4. Pulpotomía (remoción de la pulpa coronaria);
5. Hemostasia y lavado de la cámara pulpar con soluciones irrigadoras detergente y humectante (p.ej. Tergipol o Tergental);
6. Aplicar una pelota de algodón con **FORMOCRESOL** sobre los cotos pulpares, quedándose durante 5 a 7 minutos hasta promover la hemostasia;
7. Remoción del algodón y poner una camada del Óxido de Zinc y Eugenol y otra del cemento de fosfato de zinc. Restauración con amalgama o corona de acero.

CUIDADOS ESPECIALES:

Realizar el descarte del producto de acuerdo con la legislación local, asegurandose eliminar completamente sus características con fines de impedir cualquier posibilidad de reutilización y daños ambientales.

CONTRAINDICACIÓN:

FORMOCRESOL es contraindicado para personas con reportada sensibilidad a algún de los componentes del producto.

ADVERTENCIAS:

No usar productos después del período indicado de validez.

El fabricante no se hace responsable por daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.
"MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS".

USO EXCLUSIVO DEL CIRUJANO DENTISTA

FORMOCRESOL

Dental Pulp Mummification Material

biodinámica®

CONTENTS:

1x10mL flask **FORMOCRESOL**.

Reg. ANVISA: 10298550076.

COMPOSITION:

Formaldehyde, ortho-Cresol, Glycerin; 96° Ethyl Alcohol.

INDICATION:

For conservative treatment of primary dentition and in some specific cases of permanent teeth;

TECHNICAL INFORMATION:

Its formulation attends the concepts adopted by the current researches being, therefore, more diluted than the standard composition of Buckley, but it has the same or superior effectiveness, and a larger biological compatibility;

Its function is to fasten the alive pulps, maintaining them inert and facilitating the conservation in deciduous tooth until a close time of the physiologic fall (pulpotomy);

It has a potent antibacterial action by its components action, which justifies its use in long curative in endodontics treatment.

USE INSTRUCTIONS:

1. Anesthetize and isolate the tooth with a rubber dam;
2. Remove all decayed tissue;
3. Remove cavity pulp roof;
4. Remove coronal pulp (pulpotomy);
5. Rinse cavity pulp using detergent and humectant irrigation solution (a.e. Tergental or Tergipol);
6. Apply **FORMOCRESOL** on pulp stump using a cotton pellet, and wait for 5 to 7 minutes until the hemostasis;
7. Remove the cotton pellet and apply a layer of Zinc Oxide and Eugenol and other with Zinc Phosphate Cement. After restore with amalgam or steel crown.

SPECIAL CARE:

Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its reuse and environment damages.

CONTRAINDICATION:

FORMOCRESOL should not be used in patients is known to have sensibility to any of the ingredients listed.

WARNINGS:

Do not use material after expiry date.

The manufacturer is not liable for damages caused by improper use or use not provided at these instructions.
"KEEP MATERIAL OUT OF THE REACH OF CHILDREN".

FOR USE IN DENTISTRY ONLY